

24 通道锁相放大器使用步骤

1. 安装 SigmaStudio 4.6，安装路径选择默认。
2. 使用 SigmaStudio 4.6 打开 LIA-v5-24CH.dspproj 文件，主界面如图 1 所示。

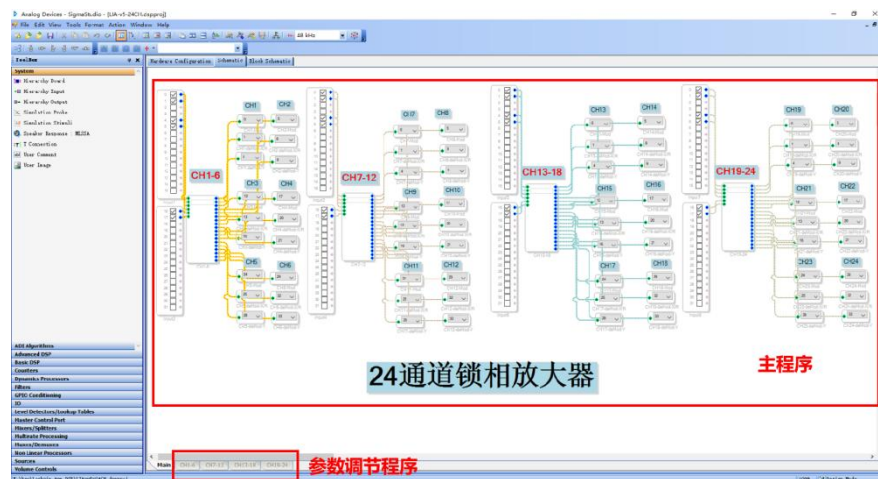


图 1 控制程序主界面

3. 连接电源，依次开启总开关、开关，如图 2 所示。



图 2 背板

4. 通过 USB-USB 连接线将设备连接至电脑 **USB 2.0** 接口，在 Hardware Configuration 看到 USB 字样底色由红色变为白色即为连接正常，如图 3 所示。

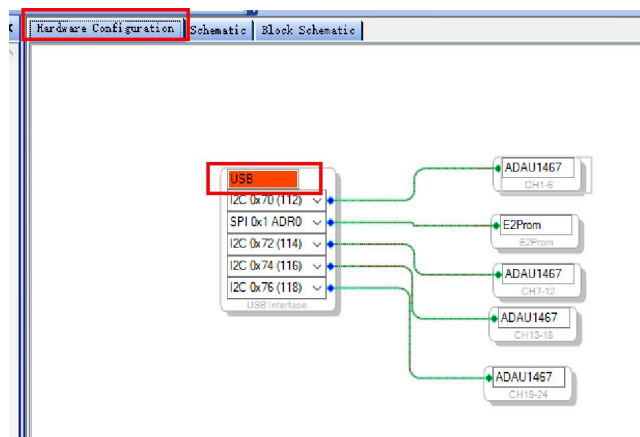


图 3 Hardware Configuration 界面

5. 点击工具栏中 Link Compile Connect 按钮，即可使用，如图 4 所示。

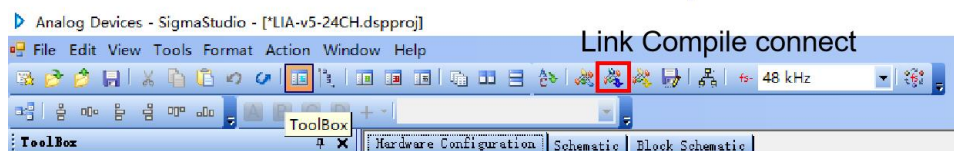


图 4 Link Compile Connect

6. 参数调节界面。

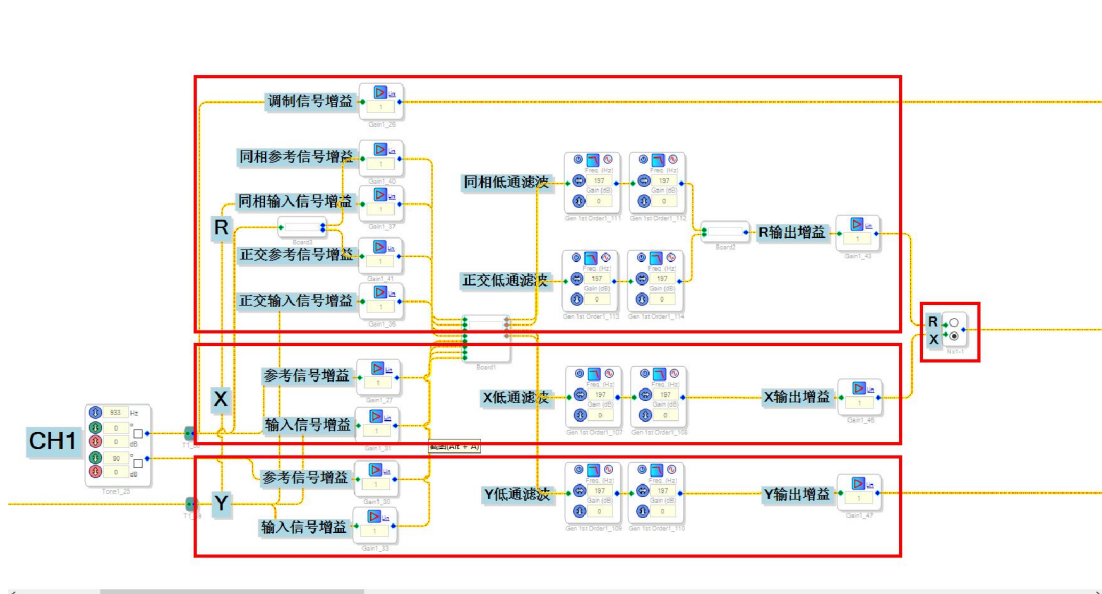


图 5 参数调节界面